

Chirurgische/Free-flow vacuümregelaar (ISO)

BESCHRIJVING EN TOEPASSING

De chirurgische/free-flow vacuümregelaar van Ohio Medical® is speciaal ontworpen met het oog op een hoge flowcapaciteit en minimaal onderhoud in operatiekamer en op plaatsen waar sterke afzuiging wordt gebruikt. Het apparaat zorgt voor betrouwbare aspiratie in alle afzuigprocedures met continue flow en is uitgerust met talrijke handige, gebruiksvriendelijke functies die de afzuiging tijdens chirurgische ingrepen en/of noodgevallen vergemakkelijken.

Het exclusieve rechttoe-rechtaan regelmechanisme van de Surgical/Free-Flow neemt de plaats in van de complexe vacuümcircuits die men bij vele andere regelaars ziet. Het verschaft hoge flows tot 150 L/min en voorkomt de ophoping van aërosols en pluisjes die verstoppingen veroorzaken in andere regelaars. Het is geclassificeerd als een hoog vacuüm-/hoge flowapparaat. De hoogvacuümmeter is geschikt voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.

De chirurgische/free-flowregelaar kan ook voor diagnostische doeleinden worden gebruikt om de maximumdruk van wandaansluitingen te testen.

EIGENSCHAPPEN EN PLUSPUNTEN

- **Rechthoekige afzuiging**
Onbepaalde, hoge flowcapaciteit tot 150 L/min
Minder verstopping en stilstandtijd
- **Regeling over volledig bereik**
Regelt over het gehele beschikbare vacuümbereik
Automatische zelfafstelling
Keus tussen geregelde of wijd open afzuiging
- **Grote, makkelijk afleesbaar meter**
Meterwijzerplaat 6,5 cm (2,5 inch)
Convex lensdeksel voor minder verblinding
- **Quick Flip ON/OFF (AAN/UIT)-schakelaar**
Waarneembare "ON" (AAN) stand
Wordt aangezet op vooringesteld niveau
- **Diagnostiekvenster**
Directe waarneming van de mechanische werking
Snelle, eenvoudige toegang voor reiniging, onderhoud
Zeskantsleutel meegeleverd
- **Grote bedieningsknop**
Gemakkelijk te regelen
Snelle respons; één slag van OFF (UIT) naar volledig



- Hoge chirurgische/free-flow
- 0-101.3 kPa gauge
 - 0-760 mm Hg gauge

vacuüm

- **Duurzaam qua ontwerp en constructie**
Weinig mechanische onderdelen
Sterke, breukbestendige behuizing
- **CE-markering**
- **Opties bij het bestellen**

Verkrijgbaar in verscheidene configuraties, waaronder sondes voor aansluiting op bronvacuüm. Ook verkrijgbaar met opties voor afnameapparaten en overflowbescherming.

Hoge chirurgische/free-flow

- 0-101.3 kPa (0-760 mmHg) - Hoog vacuüm-meter
- Hoge flowcapaciteit
- Weinig onderhoud, gemakkelijk onderhoud
- Betrouwbare, beproefde meter en bedieningen
- Makkelijk afleesbare meter
- Snel reagerende afzuigbedieningsknop
- Quick flip controleschakelaar

Specificaties*

Flowcapaciteit

0-150 L/min zonder fittingen bij maximale toename

Nauwkeurigheid meter

± 5% over hele schaal

Afmetingen

14,5 cm H x 7,62 cm B x 9,65 cm D
(5,7" H x 3,0" W x 3,8" D)

Gewicht

0,680 kg (1 lb 8 oz.)

Toegepaste standaarden

ISO 10079-3

* De specificaties zijn nominaal en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verzendinformatie

Verzendgewicht

1,0 kg (2 lb. 3 oz.) zonder fittingen en adapters

Afmetingen verpakking


26,16 cm H x 19,8 cm B x 17,27 cm D
(10,3" H x 7,8" W x 6,8" D)

Verpakking

Eén per doos

Voor nadere informatie, neem contact op met een verkoper van Ohio Medical of met een erkend leverancier.

Configuratie van de onderdelen

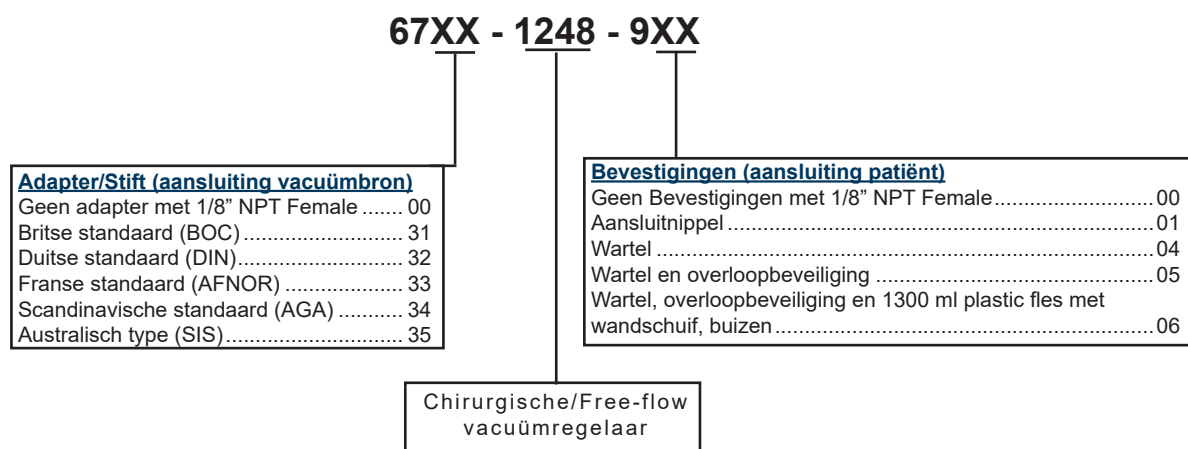

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR: EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australia

© 2019 Ohio Medical LLC. Dit document bevat geheime en vertrouwelijke informatie van Ohio Medical LLC. Het gebruik van deze informatie vindt plaats onder licentie van Ohio Medical LLC. Elk ander gebruik dan het door Ohio Medical LLC toegestane gebruik is verboden. Ohio Medical en het beeldmerk van Ohio Medical zijn geregistreerde handelsmerken van Ohio Medical LLC.



550036-DU-SFF (Rev. 3.1) 08/19

1111 Lakeside Drive Gurnee, IL 60031 USA
866.549.6446 | ohio-medical.com